



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Массажер для шеи NECK RELAX




СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности устройства	3
1.1 Комплектация	3
1.2 Функции пульта ДУ	4
2. Работа с устройством	4
2.1 Зарядка массажера	4
2.2 Использование функций	4
3. Использование батарей.....	5
3.1 Батарея массажера	5
3.2 Батарея пульта	5
4. Меры предосторожности	5
5. Чистка и обслуживание	6
6. Технические характеристики	6


1. Особенности устройства

Интеллектуальный массажер для шеи. Воздействует вибрацией, теплом и электромагнитными импульсами на акупунктурные точки шеи. Массажёр адаптируется к искривлениям шейного отдела. Пульт управления позволяет индивидуально подобрать комфортное и эффективное сочетание способов и уровней воздействия. Температура нагрева аппликаторов от 0 °С до +65 °С. Время процедуры задается с пульта управления от 1 до 30 минут. Питается массажер от двух батареек формата АА.

1.1 Комплектация

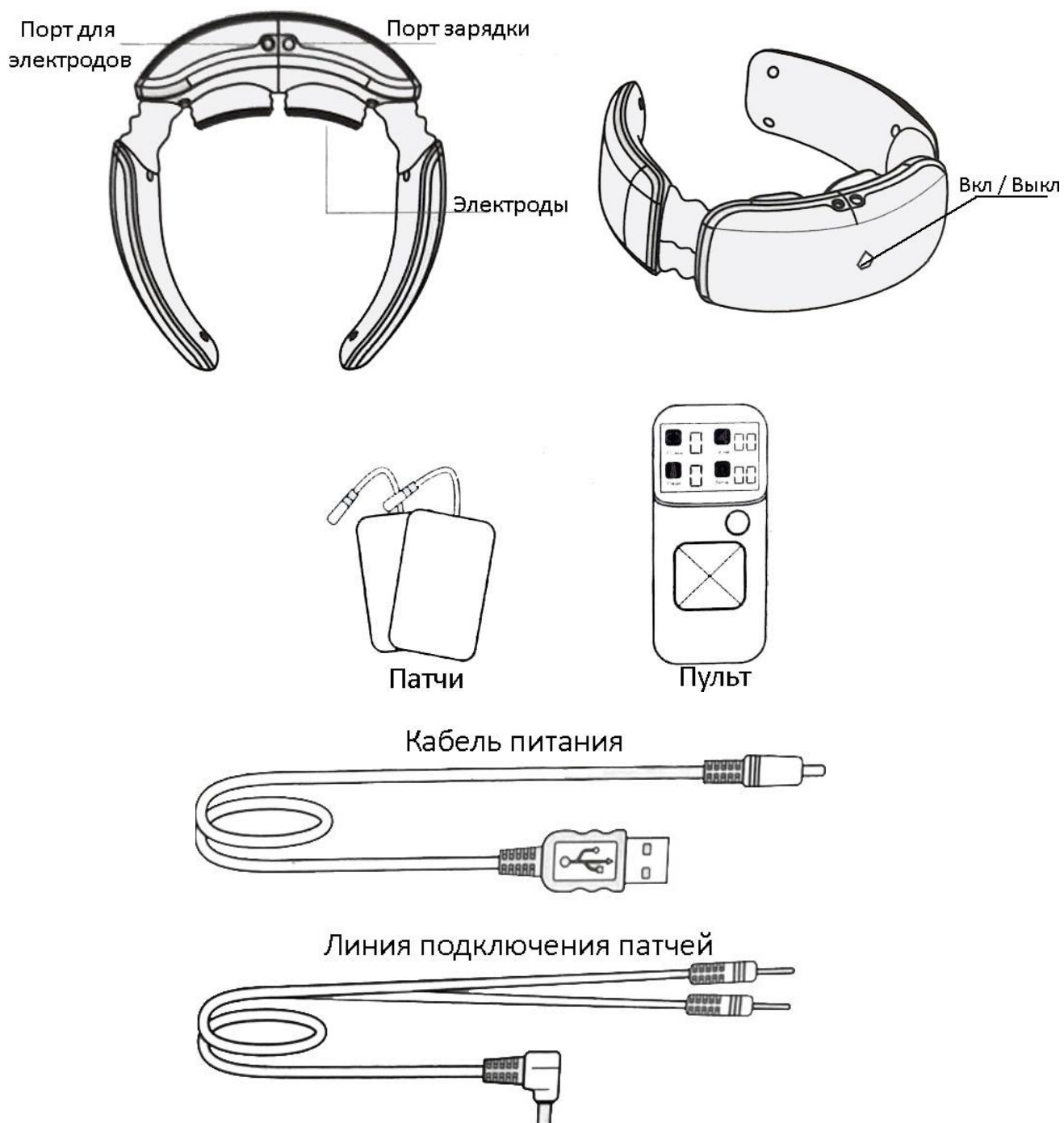

1.2 Функции пульта ДУ

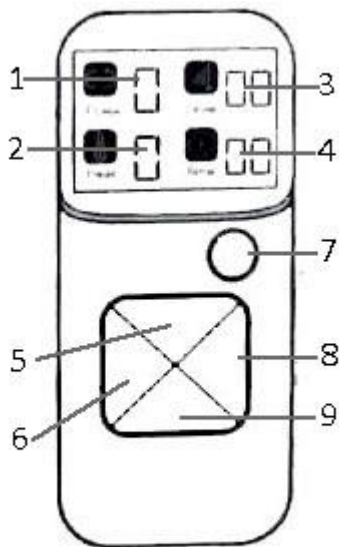

- 1) Режим массажа;
- 2) Сила нагрева;
- 3) Сила массажа;
- 4) Время;
- 5) Увеличить;
- 6) Повернуть влево;
- 7) Переключение;
- 8) Повернуть вправо;
- 9) Уменьшить.

2. Работа с устройством

2.1 Зарядка массажера

Перед первым включением массажера, зарядите его. Для этого подключите кабель питания одним концом в порт зарядки, а вторым – к блоку питания. Подключите блок питания к сети.

2.2 Использование функций

- 1) Включите массажер кнопкой Вкл/Выкл, подождите пока индикатор работы не начнёт мигать.
- 2) Влажной тканью протрите внутреннюю сторону массажера, которая соприкасается с шеей. Уделите особое внимание электродам.
- 3) Нажмите кнопку Переключение на пульте дистанционного управления. Индикатор питания начнёт гореть ровным светом. Устройство запустит программу массажа по умолчанию.
 - По умолчанию время массажа 10 минут. Отрегулируйте время массажа стрелками вверх и вниз от 5 до 30 минут.
 - По умолчанию режим массажа «полный цикл». Выберите режим массажа стрелками вверх и вниз.
 - По умолчанию сила нагрева не включена. Отрегулируйте силу нагрева стрелками вверх и вниз от 0 до 9.

- По умолчанию сила массажа 1. Отрегулируйте силу стрелками вверх и вниз от 1 до 50.
- 4) Остановить работу можно, снизив силу массажа до 0. Выбирайте соответствующее окно стрелками Влево и Вправо. Регулируйте настройку стрелками Вверх и Вниз.

3. Использование батарей

3.1 Батарея массажера

Заряжайте батарею массажера по мере необходимости. Полная зарядка происходит примерно за 6-8 часов. Хватает полного заряда батареи на 5 дней использования (30 минут в день).

При нормальном использовании батареи хватает более чем на 500 циклов зарядки.

Рекомендуется заряжать устройство, даже если вы не пользуетесь устройством, раз в месяц.

3.2 Батарея пульта

- В пульте дистанционного управления используется батарея типа CR2032, которой хватает примерно на 30 дней. При использовании 2 раза в день по 15 минут.
- Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, вытащите батарею из пульта. Протечка электролита может привести к повреждению и неисправности пульта.
- Используйте только батареи указанного типа.
- Устанавливайте батареи, соблюдая полярность.
- Не используйте пульт при температуре выше 45 °С, это повлияет на ее характеристики и срок службы.
- После использования батареи утилизируйте ее в соответствии с требованиями по защите окружающей среды вашего региона.

4. Меры предосторожности

1. Не используйте устройство вместе с медицинскими электронными устройствами, такими как кардиостимулятор, искусственное сердце, искусственная вентиляция легких или ритмоводитель.
2. Запрещено использование массажера вместе с высокочастотным хирургическим оборудованием. Это может вызвать ожоги.

3. Не используйте вблизи коротковолновых или микроволновых терапевтических устройств.
4. Не используйте электроды на груди, это может вызвать эффект фибрилляции легких.
5. С осторожностью пользоваться массажером рекомендуется следующей группе лиц: людям с чувствительной кожей, с заболеваниями сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, беременным женщинам, женщинам в менструальный период. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
6. Не используйте массажер рядом с сердцем, головой, ртом, гениталиями и поражениями кожи.
7. Запрещено использование в местах с высокой влажностью, высоким электромагнитным излучением, при высокой температуре.
8. Запрещено использование во время сна, купания. Во время принятия алкоголя или во время занятий спортом.
9. Немедленно прекратите использование массажера, если вы почувствовали дискомфорт.
10. Храните в недоступном для детей месте.
11. Храните в темном, сухом, хорошо вентилируемом месте.

5. Чистка и обслуживание

- 1) Для чистки корпуса используйте чистую влажную ткань.
- 2) После каждого использования чистите электроды мягкой тканью или сухим полотенцем. Если загрязнение сильное, протрите электроды медицинским спиртом (концентрация спирта 75%).

6. Технические характеристики

- Напряжение: 3,7 В;
- Потребляемая мощность: <3 Вт;
- Питание пульта: CR2032 на 3 В;

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**